

C-skinne

Vægskinnesystem

Primær anvendelse

Hjemmepleje
Institutioner
Hospitaller

Ergolets C-skinne er det nyeste medlem af Luna skinnefamilien og er klar til at videreføre skandinavisk designs stolte traditioner.

Denne enestående vægmonterede skinneløsning består af et tyndt, fladt panel og er et diskret og stilfærdigt alternativ til skæmmende væg- eller loftsbeslag, som almindeligvis bruges. Foruden at være et attraktivt alternativ er C-skinne enkelt og hurtigt at montere. Dermed er systemet meget effektivt i forhold til prisen, og C-skinne er hurtigt ved at blive det foretrukne valg til hjemmet og institutionen.

Fleksibilitet er en af C-skinnens vigtigste egenskaber, fordi traversskinnen sørger for, at der er enkle og hurtige løftemuligheder fra ét rum til et andet. Når man har besluttet hvilke rum, der skal udstyres med lofts- eller vægskinner, så er C-skinne svaret.

C-skinne bruges både til de bevægelige kørevogne og til de ting, der fastgøres til væggen. Når den ikke er i brug, kan skinnen skjules ved hjælp af Ergolets dækplade, som gør C-skinne til en helt skjult og dermed meget diskret vægskinne.

Desuden har C-skinne en smal rille på undersiden, som kan bruges til ophængning af lette boghylder, billeder eller andre vægdekorationer, uden at der skal bores huller eller bankes søm i væggen.

Vigtigste standardfunktioner

Kan monteres på næsten enhver type væg.


Tilbehør

Der findes et bredt udvalg af tilbehør til C-skinne, som for eksempel beslag til ophængning af billeder, etc. Desuden findes et omfattende udvalg af beslag til forskellige monteringsformål.



PRODUKTETS VIGTIGSTE EGENSKABER


- Førende design og funktionalitet.
- Kan monteres på næsten alle typer vægge.
- Enkel og hurtig at montere. Besparende.
- Teleskopvogn der kompenserer for forskellige afstande mellem vægge.
- Profilen kan bruges til at understøtte lette hylder, billeder eller gardiner.
- Rent og enkelt state-of-the-art design.

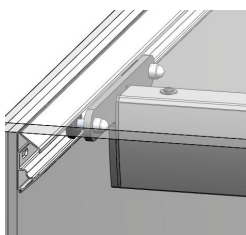


Unik teleskopvogn kompenserer for varierende afstande mellem vægge.




Hurtig og enkel at montere, sparer tid og mindsker omkostningerne.

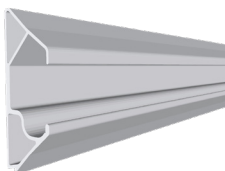

Tynd og diskret profil.

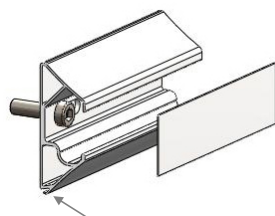

Profilen er forsynet med et lille spor nederst på skinnen. Denne kan benyttes til billedophæng, boghylde eller anden vægdekoration.


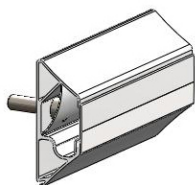


Når skinnen ikke er i brug, bliver C-skinne nemt en del af rummets udsmykning, når en dækplade klikkes på.

Version	HMI-nummer	Varenummer
C-skinne 4,3m		016-00990
C-skinne 5,5m		016-00991
C-skinne 7m		016-00992

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vægt på profil	200 kg og 275 kg
Profils mål (dybde/højde)	33 mm x 87 mm
Vægt	1,14 kg/m
Materiale	Aluminium
Eksempler på montering	Gipsplade, træ, beton, mursten
Farve	Hvid pulver-coating

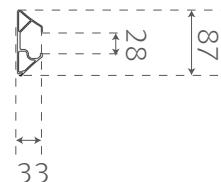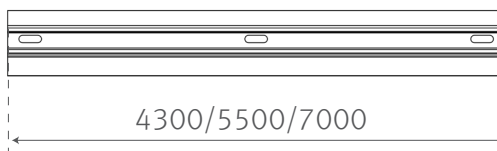

Se den tekniske manual for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende og kan være forskellige i forskellige situationer. WinnCare forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.

Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Tal med din forhandler.



date 18.01.2012 - ver. 1

WinnCare Nordic ApS
Tårnborgevej 12C
4220 Korsør
Danmark
tlf. +45 70 27 37 20
e-mail: info@winnCare.dk

www.winnCare.dk

WINNCARE
N o r d i c