

# COLCHÃO Y COJÍN AIRE MOTORIZADO AUTOMÁTICO E INTELIGENTE

**axtair automorpho**® **axensor**®  
technology

AJUDA NO TRATAMENTO DAS UPP (ÚLCERA POR PRESSÃO) COM ESTÁGIO DE I A 4 EM PACIENTES DE ALTO RISCO, DURANTE O DIA E DEITADOS DURANTE MAIS DE 15 HORAS POR DIA.

PARA PACIENTES DE:

30 A 150 KG (ALMOFADA) 30 A 165 KG (AT12) 30 A 180 KG (AT15 E AT15DV) 30 A 200 KG (AT20)

MODELOS AXENSOR DISPONÍVEIS:



Colchão 12 cm de ar medicinal.  
Base de espuma de 5 cm



Colchão 15,5 cm de ar medicinal.  
Base de espuma de 5 cm



Modelo **DECUBITO PRONO**  
15,5 cm de ar terapéutico.  
Base de espuma de 5cm



Colchão com ar completo  
20 cm de ar medicinal.




Almofada 10 cm de ar medicinal



Almofada AXTAIR Axensor

Compressor compatível com toda a gama Axensor

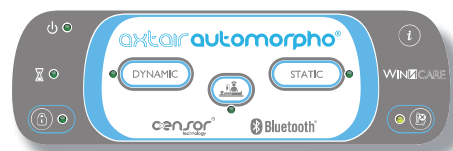

**axensor**®  
technology

- Detecção
- Análise
- Comunicação
- Ajuda a tomada de decisão (reporting)
- Rastreabilidade

**Bluetooth**™




**WINCARE**  
g r o u p

Para pacientes com risco de UPP (Úlcera por pressão)

**Elevado**


**AXENSOR**

- Ajuste automático e permanente da pressão em plano e em função da inclinação do elevador da cabeceira da cama.

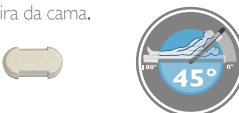


**VÁLVULA CPR**

- Abertura e fechamento da válvula manual. Facilmente manuseável com uma única mão.
- Esvaziamento do colchão em 15 segundos.
- Enchimento em 1 minuto com ajuda da bomba de insuflação rápida.




**ENVOLTÓRIO CIC**

- Envoltório soldado com tratamento antibacteriano por iões Ag+ (prevenção das contaminações cruzadas).



**ZONA DE APOIO PARA OS CALCANHARES**

- Possível esvaziamento das 4 células na zona dos pés do colchão.



**CONECTOR CPC/DATA**

- Obturação automática dos circuitos de ar durante o desligamento.
- 8 h de autonomia zona da
- Comunicação colchão-compressor.




**OPÇÃO: Bomba de insuflação rápida**




**DECÚBITO PRONO**

- Função opcional
- Esvaziamento seletivo das células centrais



**FÁCIL EXTRAÇÃO**

da parte de ar por meio de 2 cremalheiras (uma na zona dos pés e outra na cabeça do colchão) para ajudar na limpeza e desinfecção.





CPR lateral



Zona de apoio para os calcanhares de fácil acesso

**AT**

**20**

**ALTURA DO AR**

- 20 cm

**4 ZONAS TERAPÊUTICAS**

- 2 células estáticas de ar na zona da cabeça
- 4 células cérvico-dorsal
- 10 células de ar na zona do sacro com uma base de ar independente para garantir a estabilidade
- 5 células de ar independente localizada na zona dos pés (apoio para os calcanhares)







**VÁLVULA LATERAL DE CPR**

- Esvaziamento a partir do centro do colchão em apenas 5 seg.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

	REFERÊNCIA	COMPRESSOR	ALTURA TERAPÉUTICA DELAIRE	BASE DE ESPUMA	DIMENSÕES	PESO DO PACIENTE	VÁLVULA CPR	NORMAS DE FOGO
AXENSOR® AT12	VAXT6 /AUTO	22 x 25 x 11,5 cm 3 modos: dinâmica, estática de baixa pressão e cuidado, (para a almofada axensor, somente no modo dinâmico disponível no modo ligado). Tecnologia baseada na pressão alternada de 1 célula em 2 durante um ciclo completo de 14 a 20 minutos Sistema patenteado de cálculo automático e contínuo da pressão de insuflação de acordo com a morfologia e a posição do paciente. Alarmes sonoros e visuais. Fluxo > 8 l / min. 220-240 V - 50Hz Classe II Tipo BF: consumo média: 5 watts	12 cm	Base de espuma de poliéter de 5 cm localizada em um compartimento independente	195 x 87 x 17 cm	30 a 165 Kg	✓	EN 597 - 1 y 2 GPEM DI-90 & DI-89 bis
AXENSOR® AT15	VAXT6 /MAX	Potência de ruído <35 dBA conforme a NF ISO 3744: 1995 Conformidade elétrica e eletromagnética conforme as normas IEC 60601-1 e 60601-1-2	15,5 cm		195 x 87 x 20,5 cm	30 a 180 Kg	✓	
AXENSOR® AT15 DV	VAXT6 /MAX-DV		15,5 cm		195 x 87 x 20,5 cm	30 a 180 Kg	✓	
AXENSOR® AT20	VAXT6 /AT20		20 cm		195 x 87 x 20,5 cm	30 a 200 Kg	✓	
AXENSOR® COJÍN	VAXT6 /CO /AUTO		10 cm		45 x 45 x 10 cm	30 a 150 Kg		

Garantia: 2 anos

Manutenção: Envoltórios Promust CIC:      

Limpeza e desinfecção compatíveis conforme o método RABC.

**WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España**  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.