

KISSEN GEL UND SCHAUMSTOFF **GELSCAR, GELTOP ERGOMIX**



AUS ZÄHFLÜSSIGEM GEL IN VERBINDUNG MIT EINER BASIS AUS SCHAUMSTOFF MIT HOHER FEDERKRAFT BESTEHENDE KISSEN.

- **Wirksamkeit:** Verringerung der auf die Haut angewendeten Abscherkräfte dank der viskofluiden Eigenschaften des Gels
- **Sicherheit:** Stabilisierungsprinzip des Kissens.



KISSEN GELSCAR

- Verringerung der auf die Haut angewendeten Abscherkräfte dank der viskofluiden Eigenschaften des Gels
- Minderung der maximalen Drücke.
- Sicherung des Sitzes durch 4 an den vier Ecken vernähten Litzen.
- Isothermie durch die Eigenschaften der Umhüllung aus zellulärem Neopren.
- Das Gel kann beim ersten Kontakt ein Gefühl der Frische vermitteln: mit der Umhüllung aus Neopren kann dies abgeschwächt werden.



KISSEN GELTOP




Für zuhause: 2 Bezüge im Lieferumfang.
Für öffentliche Einrichtungen: Lieferumfang mit 1 Bezug.



- Minderung der maximalen Drücke durch Versenken des Körpers in ein flüssiges Gel, das von einem Schaum mit hoher Federkraft unterstützt wird.

- Verringerung der auf die Haut angewendeten Abscherkräfte dank der viskofluiden Eigenschaften des Gels
- Thermoregulierung durch die Permeabilität des Schutzes vor Wasserdampf.

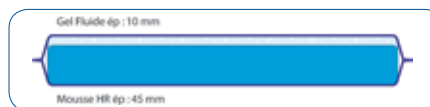

KISSEN ERGOMIX

- Kombination aus einem Schaumstoff Zyprex und einem viskofluiden Gel unter dem Ischiasbereich.
- Verringerung des "nach-vorne-Gleitens" durch einen anpassbaren pelvischen Anschlag.



TECHNISCHE MERKMALE

BEZEICHNUNG	REFERENZ	ABMESSUNGEN:	PATIENTENGEWICHT	BRANDSCHUTZ-NORMEN
GELSCAR für einen Sesselsitz der Breite 38/42 und der Tiefe 39/42.	VGLS01C	40 x 40 x 3,5 cm	40 bis 100 kg	EN 591-1 und 2
GELSCAR für einen Sesselsitz der Breite 40/45 und der Tiefe 44/47.	VGLS01C/4345	43 x 45 x 3,5 cm		
GELSCAR für einen Sesselsitz der Breite 40/42 und der Tiefe 40/42, Bezug aus Techmapolar.	VAB40	40 x 40 x 5,5 cm	30 bis 95 kg	
GELSCAR für einen Sesselsitz der Breite 43/45 und der Tiefe 43/47, Bezug aus Techmapolar.	VAB4345	43 x 45 x 5,5 cm		
ERGOMIX, Bezug aus elastischem Pro Elastic / rutschfestem Antigliss.	VCPM/G	40 x 45 x 7 cm	30 bis 90 kg	

Garantie 2 Jahre

Pflege: Bezüge



ASKLÉ SANTÉ Groupe Winnicare – 200 rue Charles Tellier – ZI de Grézan – 30034 Nîmes Cedex 1 Frankreich
Tel.: +33 (0)4 66 02 15 15 – Fax : +33 (0)4 66 02 15 28 – E-Mail : contact@askle.com

www.winnicare.fr

In dem Bestreben der permanenten Verbesserung seiner Produkte
ASKLÉ SANTÉ behält sich das Recht vor, die technischen Merkmale ohne Vorankündigung zu ändern - Fotos nicht verbindlich

