

ALMOFADAS GEL E ESPUMA **GELSCAR** **GELTOP**



ALMOFADAS EM GEL VISCOELÁSTICO ASSOCIADO OU NÃO A UMA BASE DE ESPUMA DE ALTA RESILIÊNCIA

- **Eficácia:** redução das forças de cisalhamento aplicadas à pele graças às propriedades do gel visco fluido.
- **Segurança:** princípio de estabilização da almofada.




Almofofa Geltop



Almofofa Gelscar

ALMOFADA GELSCAR

- Redução das forças de cisalhamento aplicadas à pele graças às propriedades do gel visco fluído.
- Redução das pressões máximas.
- Segurança do assento reforçada por 4 cordões cosidos nos 4 cantos.
- Isotermia graças às propriedades do suporte de neopreno celular.
- O gel pode proporcionar uma sensação refrescante no primeiro contacto: o suporte de neopreno permite atenuá-la.

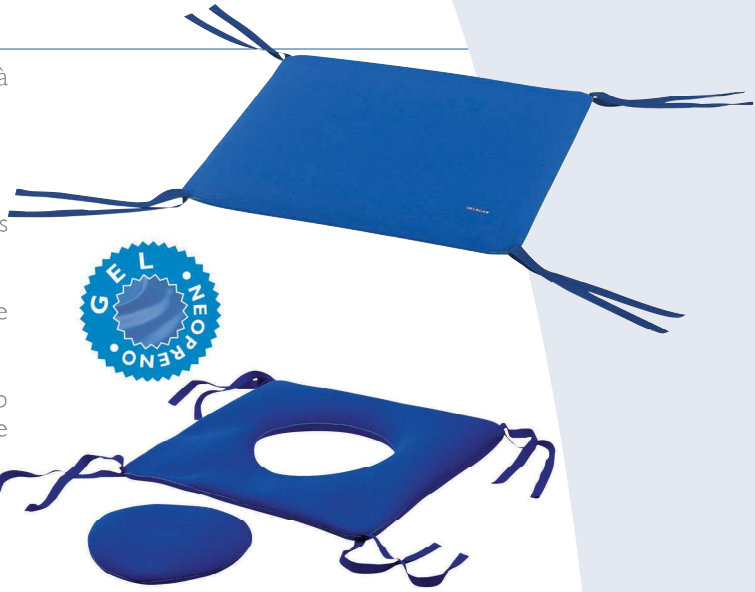

Espessura 35mm.



ALMOFADA GELTOP




Disponível com dois tipos de envoltório.



- Redução das pressões máximas por imersão do corpo no gel fluído contido num suporte de espuma de alta resiliência.
- Redução das forças de cisalhamento aplicadas à pele graças às propriedades do gel visco fluído.
- Termorregulação por permeabilidade da proteção contra o vapor de água.

Gel fluído espessura: 10 mm

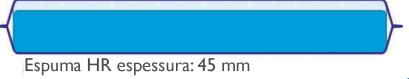

Espuma HR espessura: 45 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	DIMENSÕES (cm)	PESO PACIENTE	NORMAS PROTEÇÃO FOGO
GELSCAR para assento de cadeira ou poltrona de 38/42cm de largura e 39/42 cm de profundidade.	VGLS01C	40 x 40 x 3,5	50 a 110 kg	EN 591-1 y 2
GELSCAR PERFURADA para assento de 38/42cm de largura e 39/42 cm de profundidade.	VGLS03C	40 x 40 x 3'5		
GELSCAR para assento de cadeira ou poltrona de 40/45 cm de largura e 44/47 cm de profundidade.	VGLS01C/4345	43 x 45 x 3,5		
GELTOP para assento de cadeira ou poltrona de 40/42cm de largura e 40/42 cm de profundidade, envoltório Techmapolar.	VAB40	40 x 40 x 5,5	40 a 95 kg	
GELTOP para assento de cadeira ou poltrona de 43/45cm de largura e 43/47cm de profundidade, envoltório Techmapolar.	VAB4345	43 x 45 x 5,5		

Manutenção: Envoltórios



2 anos de garantia.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.