

# CAMA X'PRESS

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA DIRECTIVA EUROPEA 93/42/CEE. HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE CEI 60601-2-52

- **Ergonómica:** La ergonomía mecánica de la cama permite al instalador respetar las posturas recomendadas para prevenir las TMS (Trastorno Músculo-Esquelético) durante la entrega, montaje y desmontaje de la cama. El poco espacio que ocupa y el almacenaje sobre sus propias ruedas facilita el desplazamiento en cualquier situación (ascensor, pequeños vehículos...) Cama autoportante sin kit de transporte.

- **Simplicidad:** Facilidad y rapidez en el montaje y desmontaje sin necesidad de herramientas. Dispositivos de color azul asociados a las funciones. Su papel es guiar el montaje de la cama.

- **Seguridad:** El nuevo sistema de fijación de los paneles "Easy Move" impide la pérdida de tuercas y asegura la fijación de los paneles a la cama. La distribución de los cables reduce la tracción y el riesgo de degradación.



Imágenes no contractuales

## Cama X'PRESS 2<sup>da</sup> generación autoportante



Transformación del carro autoportante en chasis.



Bloqueo del 1/2 somier de pies en posición horizontal.



Unión de las 2 mitades del somier con los pasadores.




Fijación de los paneles por sistema EASY MOVE: sencillo, rápido y seguro.

### KITS DE TRANSPORTE DISPONIBLES:



A626-00

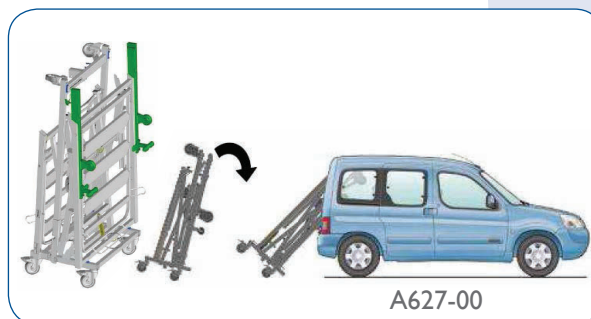

A627-00

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	ALTURA	ER*	ELEVADOR DE PIERNAS	CARGA NORMAL DE USO	RUEDAS	NORMAS	ESTANQUEIDAD
<b>X'PRESS 2<sup>da</sup> generación</b> 3 funciones eléctricas con pliegue de rodillas Ref. IXO3L08100de	Cama montada: 90x200 cm. Somier divisible	De 34 a 84 cm. Distancia al suelo: 13 cm.	75°	Pliegue de rodillas 26° y 16° Ajuste de los pies por cremallera	170 kg. Colchón 20 kg, paciente 135 kg, accesorios 15 kg.	Ø100 mm.	CEI 60601-2-52	Motorización y caja Linak IP66 Botonera con bloqueo Linak IP54

Dimensiones de la cama en posición de almacenaje: Ancho 50 cm - Largo 90 cm - Alto 160 cm



\* ER = Elevador de Respaldo

- 2 soportes para accesorios (en los largueros)
- 2 soportes de mástil porta gotero (en cabezal de la cama)
- 2 soportes de mástil incorporador (en cabezal de la cama)

Garantía mecánica, eléctrica y de la botonera 5 años.\*

Garantía de los paneles y accesorios 1 año.\*

\*En condiciones normales de uso y excepto piezas de desgaste, ver instrucciones de uso.